


PROJECTEURS ET ECRANS

APH 550



CS POLA 600

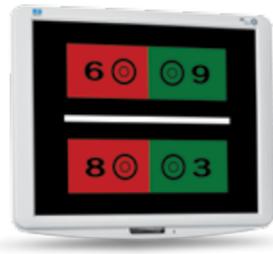

CS 550



CP 550

SPECIFICATIONS

PLAGE DE MESURES		VERRES AUXILIAIRES	
Ecart pupillaire	48 mm ~ 80 mm	Filtres rouge/vert	•
Sphère	-28.75 ~ 27.25D (0.12D, 0.25D, 0.50D und 1.00D)	Filtres polarisés	•
Cylindre	-6.00D ~ + 6.00D (0.25D, 1.00D)	Prismes	6 Δ / 10 Δ
Axe	0° ~ 180° (1° / 5°)	Maddox (Horizontal/vertical)	Red
Prisme	0 ~ 20 Δ (0.1 Δ / 0.5 Δ / 1.0 Δ)	Verre à Skiascopie	•
CONVERGENCE (VP)	•	Cylindres croisés (±0.50D)	•
DISTANCE VERTEX	12/13.75/16/18 mm	Trou stenopéique	•
DIMENSION ET POIDS		Obturateurs	•
Tête	417 (L) (max) x 112 (P) x 308 (H) mm - 5.3 kg	Cylindres croisés Jackson	±0.25D / ±0.50D
Console	272 (L) x 272 (P) x 204 (H) mm - 2.5 kg	CONSOLE	
Alimentation	326 (L) (max) x 119 (P) x 83 (H) mm - 2.4 kg	Ecran	10' pouces tactile
ALIMENTATION	AC 100 à 240V, 50/60Hz	Imprimante intégrée	•
CONNECTIVITE		Marquage CE de conformité	

Transfert des données vers les AKR (1) et frontofocomètres (2) de la gamme Essilor. Connexion sans fil Bluetooth ou filaire via câble RS 232.
Données de réfraction disponibles pour import dans le logiciel des gestion du magasin (3).

Spécifications du réseau sans fil :
Fréquence radio: 2.4 GHz
Portée Maximale : 10 metres (open field)

Dimensions de relié : 115 (W) x 25 (D) x 70 (H) mm

(1) AKRC500, AKRM500, AKR500, AKR550/750, WAM700, WAC 700- (2) CLE060/070, ALM500/700 - (3) Disponibilité à vérifier auprès de votre distributeur

Dans un souci d'amélioration, ces spécifications ne sont pas contractuelles et sont sujettes à modifications sans préavis.

FUNCTIONS



APH 550



ESSILOR INTERNATIONAL © - RCS Créteil B 712 049 61 B - P1007016F - 03/2016

APH 550

RÉFRACTEUR AUTOMATIQUE



Division Instruments
64 bis, avenue Aubert
94306 Vincennes Cedex France
Tel: 33 (0)1 72 94 71 00
Fax: 33 (0)1 72 94 70 27
www.essilor-instruments.com

Votre Contact



pola



Optométrie



RÉFRACTEUR AUTOMATIQUE ALLIANT VITESSE, PRÉCISION ET CONFORT

L'APH 500 est un appareil haut de gamme offrant rapidité et confort pour tout type d'examen. Sa console de pilotage très intuitive et ses nombreuses possibilités d'interconnexion en font l'équipement de choix pour ceux qui souhaitent optimiser la chaîne de réfraction.



UN EXAMEN PLUS FLUIDE ET PLUS RAPIDE

- Transfert des données depuis un AKR ou un ALM facilité.
- Commande centralisée de l'examen depuis un écran unique.
- Fonctions automatisées et protocoles programmables permettant de créer des routines personnalisées et sécurisées.
- Comparaison de visions en 2 clics seulement pour faciliter la vérification de la prescription finale.




UNE EXPERIENCE POSITIVE POUR LE PATIENT

- Rotation rapide et silencieuse des diques.
- Champ de vision large (40°) offrant une visibilité optimale.
- Un examen raccourci et moins fatigant qui démarre au plus proche de la prescription finale.
- Interactions et dialogue avec le patient favorisés pendant l'examen.

CONSOLE TACTILE ULTRA-INTUITIVE

- Grand écran tactile 10 pouces offrant des conditions d'examen optimales.
- Apprentissage rapide grâce à une interface soignée et épurée.
- Molette centrale pour affiner les valeurs S/C/A d'une seule main.
- Design compact avec écran inclinable et imprimante intégrée.

VOTRE CHAÎNE DE RÉFRACTION AUTOMATISÉE

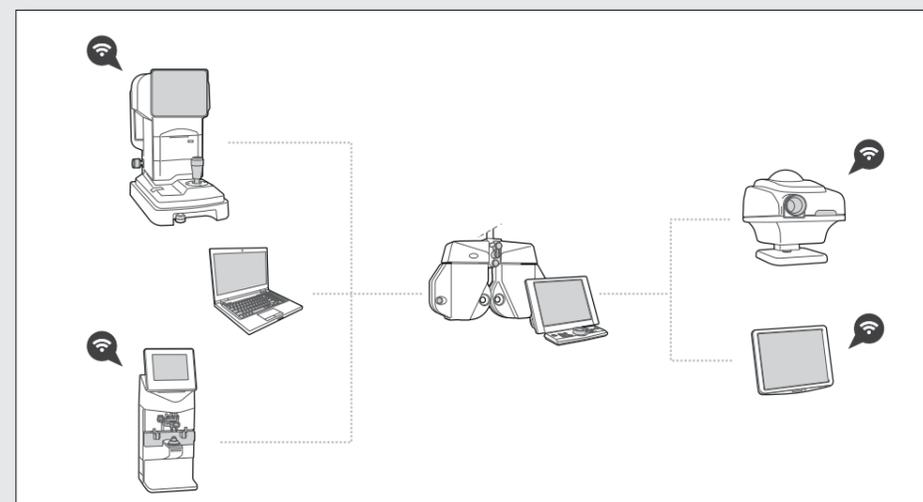

Pour encore plus de confort et d'efficacité, l'import de données à partir d'un AKR ou d'un frontofocomètre peut être automatisé.

De la même façon, en fin d'examen, l'APH 500 rend possible le transfert des résultats vers le logiciel de gestion client (1).

 Connexion sans fil (option).